

Compression Urgo Medical



Compression multitype de référence⁶

UrgoK2



Compression multitype pression modérée

UrgoK2 Lite

NOUVEAU

DOSAGE
(NIVEAU DE
PRESSION)

40
mm/Hg

INDICATION

Ulcère veineux
(IPS > 0,8)

ÉTALONNAGE



TECHNOLOGIE



PRÉSENTATIONS



Taille 1



Taille 2



Existe en version
Latex Free

PRESCRIPTION

1 boîte UrgoK2
= 1 pansement



Taille 1



Taille 2



Existe en version
Latex Free

1 boîte UrgoK2 Lite
= 1 pansement



ASSORTIMENTS URGOK2

UrgoK2

TAILLE DE LA CHEVILLE	LARGEUR DE BANDES	CODE ACL
18-25 cm	10 cm	35468.900.472.4.6
25-32 cm	10 cm	35468.900.378.0.3

UrgoK2 existe également en largeur 8 et 12 cm

UrgoK2

Latex free

18-25 cm	10 cm	35468.900.294.9.5
25-32 cm	10 cm	35468.900.294.8.8



ASSORTIMENTS URGOK2 LITE

UrgoK2
Lite

TAILLE DE LA CHEVILLE	LARGEUR DE BANDES	CODE ACL
18-25 cm	10 cm	35468.900.498.6.8
25-32 cm	10 cm	35468.900.498.7.5

UrgoK2 Lite

Latex free

18-25 cm	10 cm	35468.900.501.3.0
25-32 cm	10 cm	35468.900.501.4.7

Pour les **DROM-COM**, seuls **UrgoK2 Latex Free** et **UrgoK2 Lite Latex Free** sont disponibles.

1. Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS décembre 2010. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr. 2. O'Meara S, et al. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11:CD000265. 3. JORF - NOR : SFHH261731A. 4. Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant. 5. Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) - Version en vigueur disponible sur www.amel.fr. 6. Xpoment 2025 - Donnée Interne URGO. **Urgo K2/ Urgo K2 Latex Free** : Systèmes de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Indications : Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée. Contre-indications : Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0,8. Patient souffrant de phlegmatia caerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique, (œdème causé par une insuffisance cardiaque congestive, Pontage artériel extra-anatomique, Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour URGO K2. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS > 0,8). Dispositifs Médicaux de classe I marqués CE. **UrgoK2 Lite/UrgoK2 Lite Latex Free** : Systèmes de compression multitypes bi-bande à pression modérée et contrôlée. Indications : Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère de jambe veineux ou mixte et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression modérée est recommandée. Contre-indications : Pathologie artérielle sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0,6. Patient souffrant de phlegmatia caerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique, (œdème causé par une insuffisance cardiaque congestive, Pontage artériel extra-anatomique, Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour URGO K2 Lite. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS > 0,8), après mauvaise tolérance de la compression médicale forte, avec réévaluation systématique du traitement après 4 semaines. Dispositifs Médicaux de classe I marqués CE. Lire attentivement la notice des produits avant utilisation (notamment pour les précautions d'emploi et contre-indications). Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>. Fabricant : Laboratoire URGO. 07/2026. 1014_CB. 804278.



UrgoK2

40
mm/Hg

UrgoK2 Lite

20
mm/Hg



COMPRESSION MULTITYPE


Traitement des ulcères de jambe
et œdème des membres inférieurs.

URGO
MEDICAL
Healing people®

Compression multitype

associe deux bandes différentes aux propriétés complémentaires

Bande à allongement court

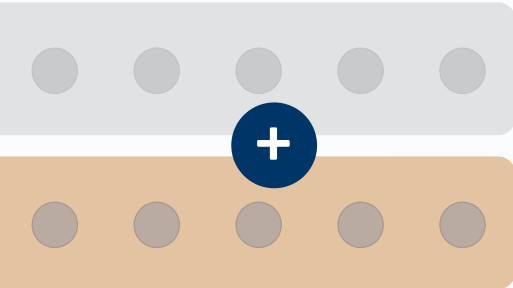

Bande à allongement long

+ Comprime et contient l'œdème

+ Pression constante et adaptation au volume de la jambe.



EFFICACITÉ PROUVÉE

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Recommandation HAS

« Compression multitype en 1^{re} intention dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux. »¹



Cochrane

Revue systématique Cochrane

« Les systèmes multitypes sont plus efficaces pour cicatriser un ulcère. »²

Patient avec risque artériel ou intolérance à la compression forte ?

NON

UrgoK2

▶40◀
mmHg

OUI

UrgoK2 Lite

▶20◀
mmHg

PRESCRIPTION

	Spécialiste Médecin généraliste	IDE/IPA ³
Prescription	✓	✗
Renouvellement	✓	✓

NOUVEAUTÉ IDE/IPA :

Renouvellement des bandes de compression à force identique à celle initialement prescrite.³

UrgoK2 ou
UrgoK2 Lite

Taille de cheville : 18-25 cm
Largeur de bandes : 10 cm

1 boîte = 1 pansement
Quantité : XX boîtes

Durée : 1 mois
Renouvelable 3 fois

Cette illustration est donnée à titre d'exemple.

NON SUBSTITUABLE⁴

- ▶ Dispositif à usage unique.
- ▶ À changer en même temps que le pansement.
- ▶ Cotation IDE : AMI 5.1 + MCI.⁵



Taille 1



Taille 2



Existe en version
Latex Free


1 boîte = 1 pansement
maximum 30 boîtes/mois*

* Si renouvellement des soins infirmiers (changement de bandes) tous les jours.

Poser la bande

ÉTAPE 1

Commencer le point d'ancrage à la base des orteils.

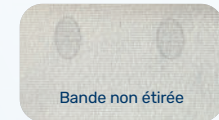

Appliquer la pression à partir de la cheville.



ÉTAPE 2

Conseil: évitez la surpression en la déroulant en amont.



Retrouvez la vidéo
de pose UrgoK2